


G12JDS06

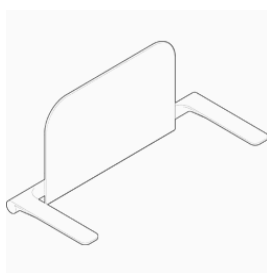

G12JDS07

IT

**ISTRUZIONI E AVVERTENZE
PER UN IMPIEGO SICURO.**

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in modo particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale per l'intera durata di vita del dispositivo a scopo di consultazione. Se questo manuale di istruzioni si danneggia o nella lettura alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il dispositivo contattare l'azienda all'indirizzo in prima pagina. Eventuali modifiche alle informazioni contenute nel manuale di istruzioni, se importanti per la sicurezza dell'utilizzatore, saranno rese note attraverso il sito internet di Ponte Giulio e comunicate a tutti i rivenditori autorizzati.

EN

**INSTRUCTIONS AND
PRECAUTIONS FOR SAFE
USE.**

Prior to installing and using the device, carefully read the instructions for use and – in particular – the safety precautions, and comply with them. Store this manual for reference for the entire life-cycle of the device. Should this manual get damaged, or if certain sections are difficult to understand or give rise to doubts, prior to using the device contact the company at the address indicated on the first page. Any changes to the information provided in the instruction manual – if deemed important for the user's safety – shall be announced through the Ponte Giulio Internet website and notified to all authorised dealers.

DE

**ANWEISUNGEN FÜR EINE
SICHERE BENUTZUNG**

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig vor der Benutzung der Stützklappgriffe. Diese sind unbedingt einzuhalten. Die vorliegende Gebrauchsanleitung während der gesamten Lebensdauer des Stützklappgriffes aufbewahren, um später bei Bedarf darin nachlesen zu können. Wenn Teile der Gebrauchsanleitung fehlen, nicht lesbar oder nicht verständlich sind, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen. Eventuelle Änderungen bezüglich der Gebrauchsanleitung werden auf der Internetseite von Ponte Giulio bekanntgegeben.

FR

**INSTRUCTIONS ET
AVERTISSEMENTS POUR
UNE UTILISATION SÛRE.**

Avant d'installer et d'utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions d'utilisation et plus particulièrement, les avertissements relatifs à la sécurité, et respecter l'ensemble des indications fournies. Conserver ce manuel pendant l'intégralité de la durée de vie d'utilisation du dispositif afin de pouvoir le consulter à tout moment. En cas d'endommagement de ce manuel d'instructions, d'incompréhension ou de doutes durant la lecture de son contenu, contacter l'entreprise à l'adresse indiquée à la première page avant toute utilisation du dispositif. Toute modification éventuelle des informations contenues dans ce manuel d'instruction, concernant la sécurité de l'utilisateur, sera notifiée à l'utilisateur par le biais du site Internet de Ponte Giulio, et communiquée à tous les revendeurs autorisés.

ES

**INSTRUCCIONES Y
ADVERTENCIAS PARA UN
EMPLEO SEGURO**

Antes de instalar y utilizar el dispositivo, leer detenidamente y atenerse estrictamente a las instrucciones de uso y especialmente a las advertencias de seguridad. Conservar este manual durante toda la vida útil del dispositivo para futuras consultas. Si este manual de instrucciones se deteriora o resulta parcialmente ilegible, o en caso de dudas, antes de utilizar el dispositivo, contactar con la empresa en la dirección indicada en la primera página. Cualquier modificación del contenido del manual de instrucciones atinente a la seguridad del usuario se publicará en el sitio Internet de Ponte Giulio y se comunicará a todos los revendedores autorizados.

IT

INFORMAZIONI GENERALI

Il dispositivo non presenta alcuna difficoltà interpretativa per l'uso nemmeno per persone con disabilità visiva, di lettura o cognitiva. Sono esclusi eventi che possono causare problemi di facilità di uso. Il dispositivo non deve essere smontato e non ha parti smontabili. Il dispositivo non ha massa complessiva maggiore di 10 kg.

EN

GENERAL INFORMATION

The device's use does not give rise to any interpretation difficulties, even for people with reduced visual, reading or cognitive abilities. There are no circumstances hampering ease of use of the product. The device must not be dismantled and does not have dismantlable parts. The device's overall weight does

DE

**ALLGEMEINE
INFORMATIONEN**

Um das Gerät zu benutzen, sind keine besonderen Fachkenntnisse, so dass es auch von Personen mit Seh-, Lese- und kognitiven Einschränkungen benutzt werden kann. Die Einfachheit der Anwendung ist in allen Situationen gegeben. Das Gerät darf nicht zerlegt werden und besitzt keine zerlegbaren Teile. Das Gesamtgewicht des Geräts

FR

INFORMATION GÉNÉRALES

Le dispositif ne présente aucune difficulté d'interprétation concernant son utilisation, même pour les personnes présentant une déficience visuelle, des difficultés de lecture ou de compréhension. Il n'existe aucune circonstance pouvant entraver la simplicité d'utilisation du dispositif. Le dispositif ne doit pas être démonté et ne comporte pas de

ES

INFORMACIÓN GENERAL

La comprensión del uso del dispositivo es sencilla, incluso para las personas con dificultades visuales, de lectura o cognitivas. Se excluyen eventos que puedan dificultar el uso. El dispositivo no se debe desmontar y no tiene partes desmontables. La masa total del dispositivo no supera los 10 kg.

Il dispositivo è biocompatibile e non contiene sostanze cancerogene, mutagene o tossiche.
È resistente alla corrosione e alle variazioni di temperatura.







not exceed 10 kg.
The device is biocompatible and does not contain carcinogenic, mutagenic or toxic substances.
It is capable of withstanding corrosion and temperature variations.


liegt nicht über 10 kg.
Das Gerät ist umweltverträglich und enthält keine krebserregenden, erbgutverändernden oder giftigen Stoffe.
Es ist korrosionsbeständig und hält Temperaturschwankungen stand.

parties démontables.
Le poids global du dispositif ne dépasse pas 10kg.
Le dispositif est biocompatible et ne contient pas de substances cancérigènes, mutagènes ou toxiques.
Il résiste à la corrosion et aux variations de température.

El dispositivo es biocompatible y no contiene sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas.
Es resistente a la corrosión y a las variaciones de temperatura.

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

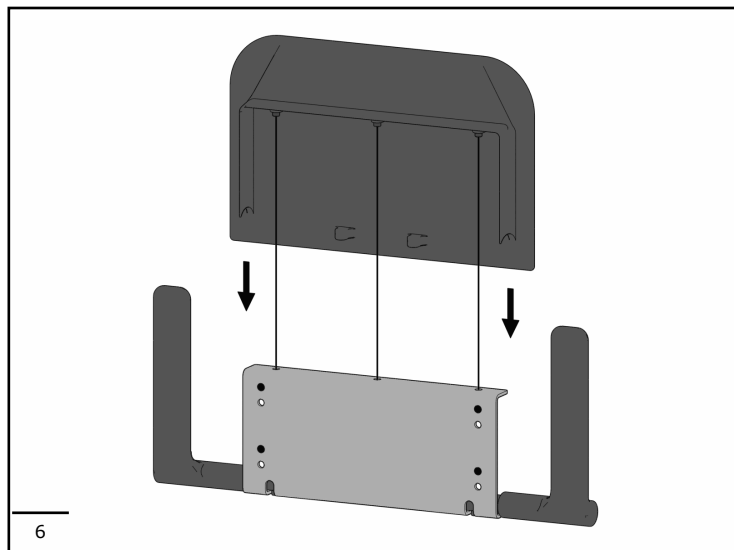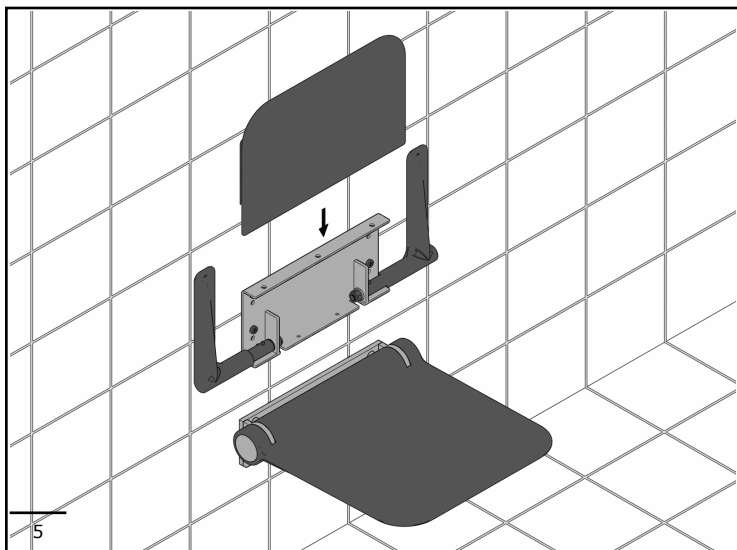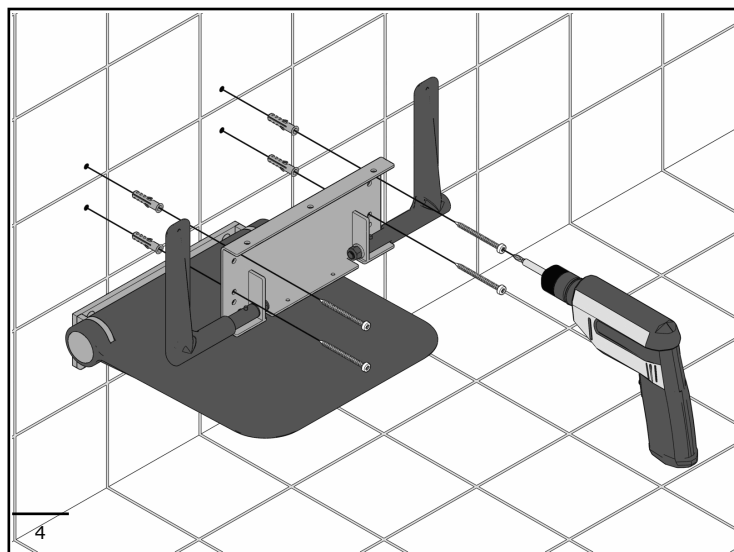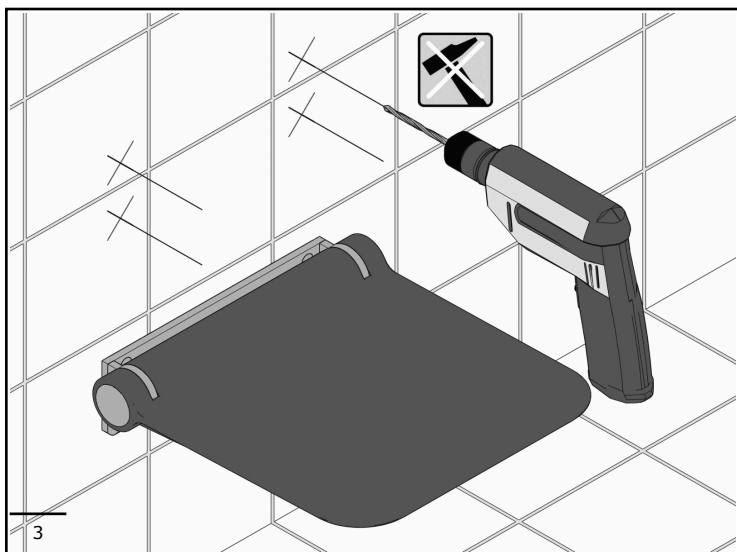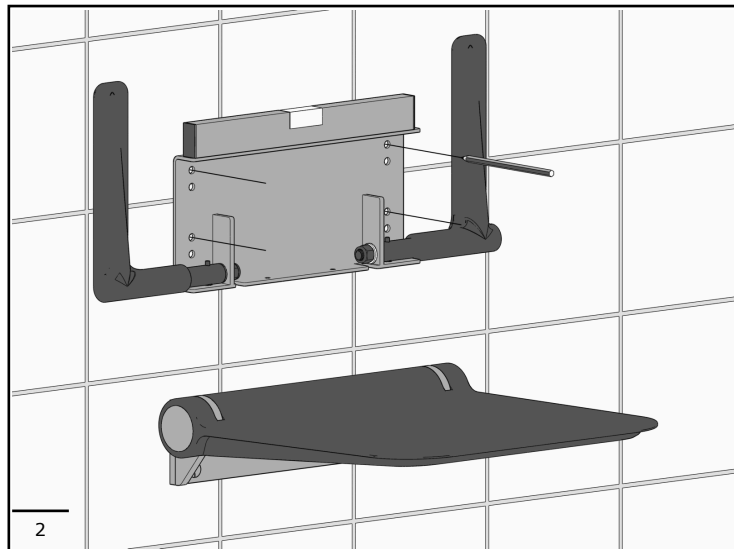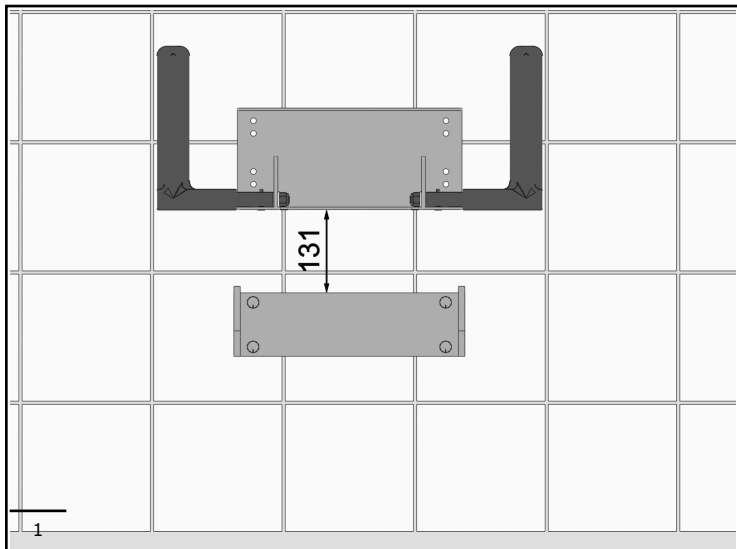

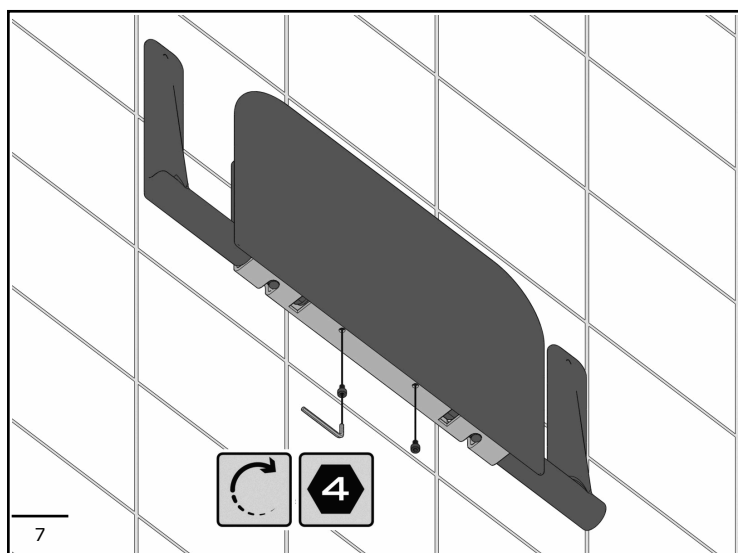

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Il dispositivo è una seduta da utilizzare esclusivamente per sedersi. L'uso improprio, ad esempio per esercizi ginnici, può provocare infortuni con gravi conseguenze.

Non sottoporre il dispositivo a carico superiore a quello per cui è stato progettato.

Il superamento di questo valore può provocare danni permanenti sia al dispositivo sia alle persone.

Per il corretto utilizzo il dispositivo deve essere lasciato libero da qualsiasi oggetto e facilmente raggiungibile.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

The device is a seat exclusively for sitting. Using the device improperly, for example for gymnastics exercises, can cause injuries with serious consequences.

Do not subject the device to loads exceeding for which it was designed.

Exceeding this load can cause permanent damage to the device or harm to people.

To ensure correct use of the device, the latter must be left free of any objects and be easily reachable.

DE

GEBRAUCHSANWEISUNGEN

Das Gerät ist ein Sitzplatz ausschließlich zum Sitzen. Die Benutzung des Gerätes, für Gymnastikübungen, kann zu Verletzungen mit schwerwiegenden Folgen führen. Setzen Sie das Gerät nicht auf Lasten aus, für die es entworfen wurde.

Eine Überschreitung dieser Belastung kann zu dauerhaften Schäden am Gerät führen oder Personen schaden.

Um eine ordnungsgemäße Verwendung des Gerätes zu gewährleisten, muss dieses von allen Objekten frei bleiben und leicht erreichbar sein.

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

L'appareil est exclusivement assis. L'utilisation incorrecte du périphérique, par exemple pour les exercices de gymnastique, peut causer des blessures avec des conséquences graves.

Ne soumettez pas l'appareil à des charges dépassant pour lesquelles il a été conçu.

Le dépassement de cette charge peut causer des dommages permanents au périphérique ou nuire aux personnes.

Pour assurer l'utilisation correcte de l'appareil, ce dernier doit être laissé libre de tout objet et être facilement accessible.

ES

INSTRUCCIONES DE USO

El dispositivo es un asiento para sentarse exclusivamente. El uso inadecuado, por ejemplo para ejercicios de gimnasia, puede causar accidentes con graves consecuencias.

No someter el dispositivo a una carga superior a la indicada.

La superación de este valor puede provocar lesiones personales y daños permanentes en el dispositivo.

Para el uso correcto, el dispositivo debe estar libre de cualquier objeto y fácilmente accesible.

IT

AVVERTENZE SULLA SICUREZZA

Il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da personale competente e qualificato, (muratore o idraulico professionista) che dovrà verificare che gli elementi di fissaggio, qualora forniti, siano idonei per la parete di installazione.

Per garantire la stabilità e sicurezza il dispositivo deve essere fissato con tasselli e viti adeguati al tipo di muro.

Non sottoporre il dispositivo a carico superiore a quello indicato. Se il dispositivo dovesse risultare instabile sospendere l'uso fino a quando questo non sia stato controllato da un tecnico

EN

SAFETY PRECAUTIONS

The device must be installed by trained and qualified personnel (bricklayer or professional plumber) who must verify whether the fixing elements, if provided, are suitable for the relevant wall. To guarantee stability and safety, the device must be attached with wall plugs and screws suitable for the relevant type of wall.

Do not subject the device to loads exceeding those specified. If the device should become unstable, suspend its use until it is properly checked by the relevant technician.

The manufacturer declines all responsibility for installation of the device not conforming in this

DE

SICHERHEITSHINWEISE

Die Montage ist nur von qualifiziertem Sanitär - Fachpersonal durchzuführen.

·Um die Stabilität und Sicherheit des Stützklappgriffes zu garantieren, müssen geeignete Befestigungsmaterialie, je nach Mauerwerk bzw.

Verankerungsgrund aus unserem Sortiment gewählt werden. Bei bauseitiger Befestigung muss der Sanitär-Fachinstallateur sich Beratung bei namhaften Befestigungsherstellern holen wie, z. B. Hilti, Fischer usw.

·Befestigungsmaterial je nach Wandbeschaffenheit auswählen. ·Nach der Installation eine oder mehrere Funktionsprüfungen

FR

AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ

Le montage du dispositif doit être effectué par du personnel compétent et qualifié, (maçon ou plombier professionnel) qui devra vérifier que les éléments de fixation, à condition que si, sont adaptés au mur d'installation. Une fois l'installation effectuée, réaliser un ou plusieurs tests d'utilisation.

Pour garantir la stabilité et la sécurité, le dispositif doit être fixé avec des tasseaux et des vis adaptées au type de mur.

Ne pas soumettre le dispositif à une charge supérieure à celle indiquée.

En cas d'instabilité du dispositif, interrompre l'utilisation jusqu'à

ES

ADVERTENCIAS SOBRE LA SEGURIDAD

El dispositivo debe ser montado por personal competente cualificado (un albañil o un fontanero profesional), que deberá comprobar que los elementos de fijación, si se proporciona, sean adecuados para la pared de instalación. Después de la instalación, realizar una o varias pruebas de uso.

Para garantizar la estabilidad y la seguridad, el dispositivo debe fijarse con tacos y tornillos adecuados para el tipo de pared. No someter el dispositivo a una carga superior a la indicada. Si el dispositivo resulta inestable, suspender el uso

incaricato.

Il produttore non è responsabile per un montaggio del dispositivo non conforme a quanto riportato nel presente manuale di uso e manutenzione.

manual for use and maintenance.

durchführen.

·Das Produkt darf keinen höheren Lasten ausgesetzt werden als auf der Gebrauchsanleitung angegeben (siehe TÜV Zulassung auf der Rückseite des Stützklappgriffes).

·Die Fläche an der der Stützklappgriff angebracht wird, muss eben sein, und frei von Stromkabeln, sonstigen Gegenständen und ohne Schwachstelle.

·Um einen sicheren Gebrauch zu gewährleisten, muss der Stützklappgriff frei von Gegenständen und leicht zugänglich sein.

Die Montage an Waschtisch, Dusche und Badewanne ist ausdrücklich verboten.

Für eine unsachmässige Montage des Stützklappgriffes wird keine Haftung übernommen.

l'exécution d'une vérification par un technicien spécialisé.

Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de montage du dispositif non conforme aux indications mentionnées dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.

hasta que lo revise un técnico.

El fabricante no se hace responsable en caso de montaje no conforme a estas instrucciones.

IT

AVVERTENZE PER RISCHI RESIDUI

EN

WARNINGS FOR RESIDUAL RISKS

DE



WARNUNGEN FÜR RESTRISIKEN

FR

AVERTISSEMENTS POUR DES RISQUES RÉSIDUELS

ES

AVVERTENZE POR RISCHI RESIDUI

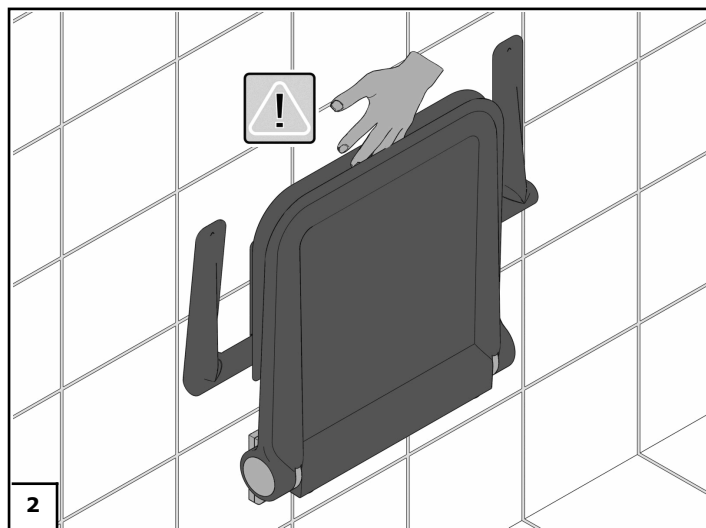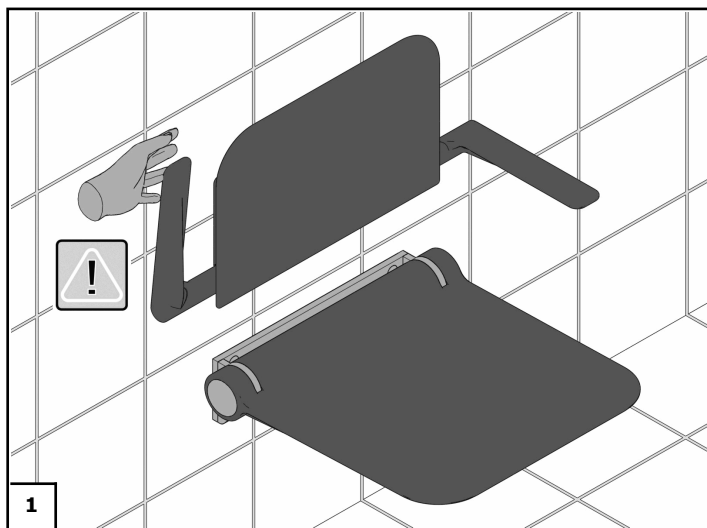

IT

PULIZIA

Pulire la superficie del dispositivo con un panno umido bagnato con sapone neutro liquido (ad esempio detergente per stoviglie). E 'vietato l'uso di detergenti abrasivi liquidi contenenti cloro, acidi o basi forti, solventi concentrati come acetone e trielina o derivati, che possono causare opacizzazione del materiale. E 'vietato utilizzare fonti d'aria calda per l'asciugatura.

EN

CLEANING

Clean the surface of the device using a damp cloth wetted with liquid neutral soap (e.g. dish soap). It is forbidden to use abrasive liquid detergents containing chlorine, strong acids or bases, concentrated solvents such as acetone and trichloroethylene or derivatives, which may cause the material too dull. It is forbidden to use hot air

DE

REINIGUNGS-UND PFLEGEHINWEISE

Um Ihnen eine lange Lebensdauer und ein dauerhaft optisch hoch ansprechendes Produkt garantieren zu können, empfehlen wir Ihnen, die Bauteile regelmäßig sanft zu reinigen.
·Vermeiden Sie stark säurehaltige Hilfsmittel welche z.B. Salzsäure, Salpetersäure, Phosphorsäure, Essigsäure und Ameisensäure enthalten.
·Vermeiden Sie stark

FR

NETTOYAGE

Passer un chiffon humide, imbibé de savon neutre liquide de type liquide vaisselle, sur la surface du dispositif. Il est interdit d'utiliser des détergents liquides abrasifs, contenant du chlore, des acides ou des bases fortes, des solvants concentrés, tels que de l'acétone et du trichloréthylène et dérivés, pouvant noircir le matériau. Il est interdit d'utiliser des sources d'air chaud pour sécher

ES

LIMPIEZA

Pasar por la superficie del dispositivo un paño húmedo embebido en jabón líquido neutro, como un detergente para vajillas. Prohibido utilizar detergentes líquidos abrasivos, con cloro, ácidos o bases fuertes, solventes concentrados, como acetona y tricloroetileno o derivados que puedan quitar brillo al material. Prohibido utilizar fuentes de aire

Disinfettare la superficie del dispositivo utilizzando un prodotto tipo candeggina almeno una volta alla settimana.

sources for drying.
Disinfect the device's surface using a bleach-type product at least once a week.

laugenhaltige Hilfsmittel z.B. Bleichlaugen, Industriereiniger und Lösemittel wie z.B. Aceton.
·Verwenden Sie zur Reinigung ein weiches Tuch z.B. Microfaser und vermeiden Sie Scheuermittel, Scheuerbürsten oder Küchenschwämme, da diese die Oberfläche beschädigen können.
·Sprühen Sie das Reinigungsmittel nicht direkt auf das Produkt, tragen Sie es mittels Reinigungstuch auf.
·Spülen Sie das Produkt nach der Reinigung mit klarem Wasser ab, oder wischen Sie die verbleibenden Reinigungsmittel mit einem Tuch ab.
·Entfernen Sie Verschmutzungen und Rückstände frühestmöglich von dem Produkt, um ein Festsetzen an der Oberfläche zu vermeiden.
·Beachten Sie die Anwendungshinweise der Reinigungsmittelhersteller. (Konzentration, Einwirkzeit).
An Oberflächen die während ihres Einsatzes beschädigt wurden, kann es durch Einwirkung von Reinigungsmitteln jeglicher Art zu einer Erweiterung des Schadens kommen.

le dispositif.
Désinfecter la surface de l'appareil avec des produits neutres au moins une fois par semaine.

caliente para el secado.
Desinfectar la superficie del dispositivo con productos neutros al menos una vez a la semana.

IT

MANUTENZIONE

Controllare almeno ogni 3 mesi la stabilità dei fissaggi a muro.
Se il dispositivo dovesse risultare instabile contattare un installatore di fiducia
Controllare almeno ogni 3 mesi la rotazione; Se la rotazione diventa libera serrare il perno fino a quando il ribaltamento è consentito solamente dall'intervento dell'utente.
Per eventuali danni si prevede la completa sostituzione

EN

MAINTENANCE

Check the stability of the wall-mount at least every 3 months.
Should the device become unstable, contact the installer.
Check whether the device pivots, at least every 3 months. If it pivots freely, tighten the pin until the tilting is allowed only by user intervention.
The device shall be fully replaced in case of any damages.

DE

WARTUNG

Die Stabilität der Wandbefestigung ist regelmäßig zu prüfen.
Wenn der Stützklappgriff in seiner Eigenschaft instabil erscheint, lassen Sie ihn von einem Fachhandwerker prüfen.

FR

ENTRETIEN

Contrôler au moins tous les 3 mois la stabilité des fixations murales.
En cas d'instabilité du dispositif, contacter un installateur certifié.
Contrôler au moins tous les 3 mois le système de rotation du dispositif ; si la rotation devient trop lâche, serrer le goujon comme indiqué dans la figure.
En cas de dommages éventuels, il est nécessaire de remplacer totalement le dispositif

ES

MANTENIMIENTO

Controlar al menos cada 3 meses la estabilidad de las fijaciones de pared.
Si el dispositivo resulta inestable, contactar con un instalador de confianza.
Controlar al menos cada 3 meses la rotación. Si pivota libremente, apriete el perno hasta que la inclinación se permite solamente por la intervención del usuario.
En caso de daños, será necesaria la sustitución completa.

IT

CONDIZIONI DI UTILIZZO

Il dispositivo non risente della temperatura dell'ambiente e comunque NON deve essere installato in ambienti soggetti a temperature minore di 4 °C o maggiore di 40 °C .
Non installare in saune. Non rispettare le temperature indicate potrebbe danneggiare il rivestimento in plastica del

EN

CONDITIONS OF USE

The device is not affected by the room's temperature, though it must NOT be installed in environments subject to temperatures below 4°C or above 40°C.
Do not install in saunas. Not comply with the indicated temperatures may damage the plastic coating of the device.

DE

GEBRAUCHSBEDINGUNGEN

Das Gerät ist unempfindlich gegenüber der Raumtemperatur, darf jedoch NICHT in Räumen verwendet werden, in denen Temperaturen unter 4 °C und über 40 °C herrschen.
Nicht für Saunen geeignet.

FR

CONDITIONS D'UTILISATION

Le dispositif n'est pas sensible à la température de l'environnement ; toutefois, celui-ci NE doit PAS être installé dans des environnements sujets à des températures inférieures à 4° C ou supérieures à 40° C.
Ne pas installer dans un sauna.

ES

CONDICIONES DE USO

El dispositivo resiste cualquier temperatura ambiente dentro de los límites de 4 °C y 40 °C.
No instalarlo en saunas.

dispositivo.

IT

SMALTIMENTO

Lo smaltimento è a cura dell'utilizzatore che deve effettuarlo secondo le leggi del paese nel quale il dispositivo è installato.
Il dispositivo non è fabbricato con sostanze dannose o pericolose per la salute e per l'ambiente e tutte le parti che lo compongono sono riciclabili e / o riutilizzabili.
Per la salvaguardia dell'ambiente per la sua fabbricazione sono stati utilizzati anche materiali con percentuali di riciclati.
Tenere l'imballo lontano dalla portata dei bambini; rischio di soffocamento.

EN

DISPOSAL

The user is responsible for the device's disposal, which must occur in accordance with the laws of the country in which the device is installed. The device is not manufactured using substances that are hazardous to human health and the environment, and all parts comprising it are recyclable and/or reusable. In order to safeguard the environment, the device also contains a certain amount of recycled materials.
Keep away from children packaging; risk of suffocation.

DE

ENTSORGUNG

Die Entsorgung ist gemäß den Vorschriften des Landes durchzuführen.
Der Benutzer hat Sorge zu tragen dass das verwendete Produkt nach Beendigung der Nutzung selbst zu entsorgen.
Unsere Produkte enthalten keine schädlichen oder gefährlichen Substanzen für die Gesundheit und die Umwelt und sind in allen Teilen recycelbar und/oder wiederverwertbar. Zum Schutz der Umwelt wurden bei der Herstellung auch Materialien mit einem Anteil an Recyclingmaterial verwendet.

FR

ÉLIMINATION

L'élimination du dispositif est à la charge de l'utilisateur qui doit l'effectuer selon les lois du pays d'installation du dispositif. Les dispositifs ne sont pas fabriqués avec des substances nocives ou dangereuses pour la santé et pour l'environnement, et toutes les parties qui le composent sont recyclables et/ou réutilisables.
Pour la protection de l'environnement, le dispositif est fabriqué à base de matériaux partiellement ou totalement recyclables.
Tenir l'emballage à l'écart des enfants ; risque de étouffement.

ES

DISECHO

Desechar el dispositivo de conformidad con las leyes del país de instalación. Los dispositivos no están hechos de sustancias nocivas o peligrosas para la salud y el medio ambiente, y todas las partes que lo componen son reciclables y/o reutilizables. Para la fabricación se han utilizado materiales con cierto porcentaje de reciclado, en defensa del medio ambiente. Mantener alejado de los niños de embalaje; riesgo de asfixia.

IT

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni visitare il sito oppure contattare il nostro rivenditore di zona

EN

FURTHER INFORMATION

For further information, please visit our website or contact the our dealer zone

DE

WEITERE AUSKÜNFTE

Für weitere Auskünfte, besuchen sie unsere Website oder setzen sie sich mit ihrem lokalen Händler Verkäufer in Verbindung

FR

INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Pour toute information complémentaire, veuillez visiter le site ou bien contacter notre concessionnaire de zone

ES

MÁS INFORMACIÓN

para más informacion visite nuestro sitio o contacte nuestro distribuidor local

IT

NOTE

Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti o alle loro specifiche senza l'approvazione preventiva o la comunicazione al cliente per:
- Modifiche necessarie per motivi di sicurezza,
- Cambiamenti che non influenzano negativamente le prestazioni del prodotto,
- Modifiche necessarie per soddisfare le specifiche del prodotto,
- Modifiche necessarie per soddisfare i requisiti di legge e dei regolamenti applicabili

EN

NOTE

Ponte Giulio reserves the right to make changes to the products or to their specifications without prior approval or notification to the customer for:
- Changes required for safety purposes,
- Changes that do not adversely affect the product performance,
- Changes needed to meet the product specifications,
- Changes needed to comply with legal requirements or applicable regulations

DE

NOTE

Ponte Giulio behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten oder ihren Spezifikationen ohne vorherige Genehmigung oder Benachrichtigung an den Kunden vorzunehmen:
- Änderungen, die für Sicherheitszwecke erforderlich sind,
- Änderungen, die die Produktleistung nicht beeinträchtigen,
- Änderungen, die erforderlich sind, um die Produktspezifikationen zu erfüllen,
- Änderungen, die erforderlich sind, um gesetzlichen Vorschriften oder anwendbaren Vorschriften einzuhalten

FR

NOTE

Ponte Giulio se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits ou à leurs spécifications sans l'approbation préalable ou la notification au client pour:
- Les changements nécessaires à des fins de sécurité,
- Les modifications qui ne nuisent pas à la performance du produit,
- Les changements nécessaires pour répondre aux spécifications du produit,
- Les changements nécessaires pour se conformer aux exigences légales ou réglementaires applicables

ES

NOTE

Ponte Giulio se reserva el derecho a realizar cambios en los productos o en sus especificaciones sin la aprobación previa o la comunicación con el cliente para:
- Los cambios requeridos por motivos de seguridad,
- Los cambios que no afectan negativamente al rendimiento del producto,
- Los cambios necesarios para cumplir con las especificaciones del producto,
- Los cambios necesarios para cumplir con los requisitos legales o reglamentarios aplicables

Ponte Giulio S.p.a
Località Ponte Giulio
05018 Orvieto (TR) ITALY
<http://www.pontegiulio.it> - info@pontegiulio.it
Tel.: +39 0763 316044 - Fax.: +39 0763 316043