


G01JAS17



G01JAS18

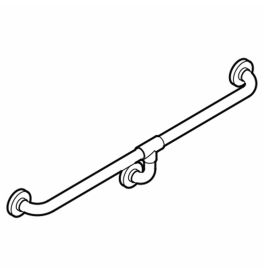


G01JAS09
G01JAS11
G01JAS10




G01JAS12
G01JAS13




G01JAS19

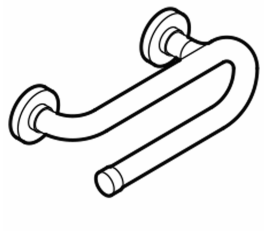


G01JER01
G01JEL01
G01JER02
G01JEL02

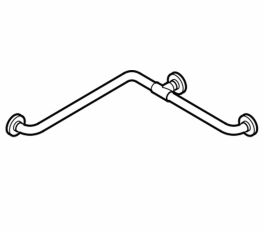


G01JBS01
G01JBS02
G01JBS03
G01JBS04
G01JBS05

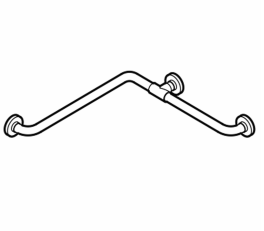


G01JBS17

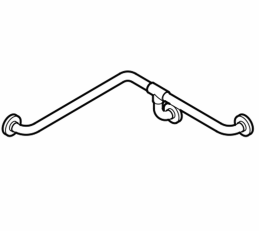


G01JBS18

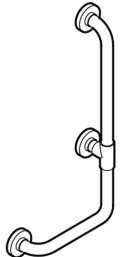


G01JBR19
G01JBL19
G01JBR20
G01JBL20

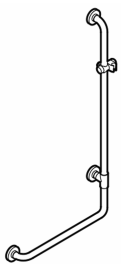


G01JOR01
G01JOL01

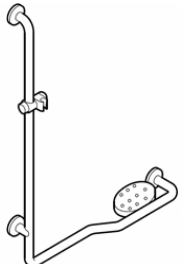


G01JOR04
G01JOL04

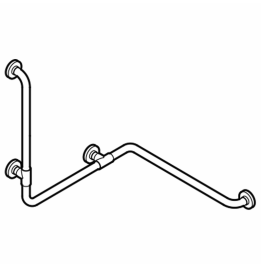


G01JBS06
G01JBS07
G01JBS08
G01JBS09
G01JBS10

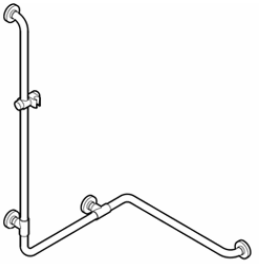


G01JOS06

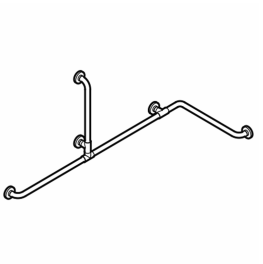

G01JBS11
G01JBS12

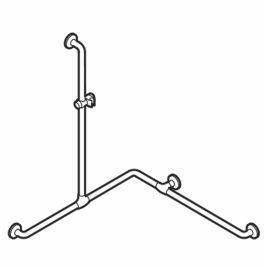

G01JOS04

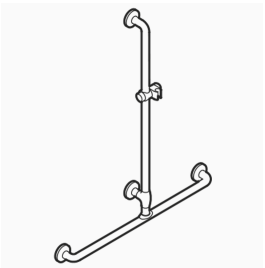

G01JBS16

IT

EN

DE

FR

ES

ISTRUZIONI E AVVERTENZE PER UN IMPIEGO SICURO.

Prima di installare e utilizzare il dispositivo, leggere attentamente le istruzioni per l'uso e in modo particolare le avvertenze sulla sicurezza, attenendosi ad esse. Conservare il presente manuale per l'intera durata di vita del dispositivo a scopo di consultazione. Se questo manuale di istruzioni si danneggia o nella lettura alcune parti risultassero di difficile comprensione o se sorgessero dubbi, prima di utilizzare il dispositivo contattare l'azienda all'indirizzo in ultima pagina. Eventuali modifiche alle informazioni contenute nel manuale di istruzioni, se importanti per la sicurezza dell'utilizzatore, saranno rese note attraverso il sito internet di Ponte Giulio e comunicate a tutti i rivenditori autorizzati.

INSTRUCTIONS AND PRECAUTIONS FOR SAFE USE.

Prior to installing and using the device, carefully read the instructions for use and – in particular – the safety precautions, and comply with them. Store this manual for reference for the entire life-cycle of the device. Should this manual get damaged, or if certain sections are difficult to understand or give rise to doubts, prior to using the device contact the company at the address indicated on the last page. Any changes to the information provided in the instruction manual – if deemed important for the user's safety – shall be announced through the Ponte Giulio Internet website and notified to all authorised dealers.

ANWEISUNGEN FÜR EINE SICHERE BENUTZUNG

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanleitung und insbesondere die Sicherheitshinweise sorgfältig vor der Benutzung der Stützklappgriffe. Diese sind unbedingt einzuhalten. Die vorliegende Gebrauchsanleitung während der gesamten Lebensdauer des Stützklappgriffes aufbewahren, um später bei Bedarf darin nachlesen zu können. Wenn Teile der Gebrauchsanleitung fehlen, nicht lesbar oder nicht verständlich sind, wenden Sie sich bitte an das Unternehmen, bevor Sie das Produkt in Gebrauch nehmen. Eventuelle Änderungen bezüglich der Gebrauchsanleitung werden auf der Internetseite von Ponte Giulio bekanntgegeben.

INSTRUCTIONS ET AVERTISSEMENTS POUR UNE UTILISATION SÛRE.

Avant d'installer et d'utiliser le dispositif, lire attentivement les instructions d'utilisation et plus particulièrement, les avertissements relatifs à la sécurité, et respecter l'ensemble des indications fournies. Conserver ce manuel pendant l'intégralité de la durée de vie d'utilisation du dispositif afin de pouvoir le consulter à tout moment. En cas d'endommagement de ce manuel d'instructions, d'incompréhension ou de doutes durant la lecture de son contenu, contacter l'entreprise à l'adresse indiquée à la dernière page avant toute utilisation du dispositif. Toute modification éventuelle des informations contenues dans ce manuel d'instruction, concernant la sécurité de l'utilisateur, sera notifiée à l'utilisateur par le biais du site Internet de Ponte Giulio, et communiquée à tous les revendeurs autorisés.

INSTRUCCIONES Y ADVERTENCIAS PARA UN USO SEGURO.

Antes de instalar y utilizar el aparato, lea atentamente y siga las instrucciones de funcionamiento y, especialmente, las instrucciones de seguridad. Conserve este manual durante toda la vida útil del aparato como referencia. Si este manual de instrucciones se daña o algunas partes resultan difíciles de entender al leerlo, o si surge alguna duda, póngase en contacto con la empresa en la dirección que aparece en la última página antes de utilizar el aparato. Cualquier cambio en la información contenida en el manual de instrucciones, si es importante para la seguridad del usuario, se dará a conocer a través del sitio web de Ponte Giulio y se comunicará a todos los distribuidores autorizados.

IT

INFORMAZIONI GENERALI

Il dispositivo non presenta alcuna difficoltà interpretativa per l'uso nemmeno per persone con disabilità visiva, di lettura o cognitiva. Sono esclusi eventi che possono causare problemi di facilità di uso. Il dispositivo non deve essere smontato e non ha parti smontabili. Il dispositivo non ha massa complessiva maggiore di 10 kg. Il dispositivo non contiene sostanze cancerogene, mutagene o tossiche. È resistente alla corrosione e alle variazioni di temperatura.

EN

GENERAL INFORMATION

The device is safe to use, even for people with reduced visual, reading or cognitive abilities. There are no circumstances hampering ease of use of the product. The device must not be dismantled and does not have dismantable parts. The device's overall weight does not exceed 10 kg. The device does not contain carcinogenic, mutagenic or toxic substances. It is capable of withstanding corrosion and temperature variations.

DE

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Um das Gerät zu benutzen, sind keine besonderen Fachkenntnisse, so dass es auch von Personen mit Seh-, Lese- und kognitiven Einschränkungen benutzt werden kann. Die Einfachheit der Anwendung ist in allen Situationen gegeben. Das Gerät darf nicht zerlegt werden und besitzt keine zerlegbaren Teile. Das Gesamtgewicht des Geräts liegt nicht über 10 kg. Das Gerät enthält keine krebserregenden, erbgutverändernden oder giftigen Stoffe. Es ist

FR

INFORMATION GÉNÉRALES

Le dispositif ne présente aucune difficulté d'interprétation concernant son utilisation, même pour les personnes présentant une déficience visuelle, des difficultés de lecture ou de compréhension. Il n'existe aucune circonstance pouvant entraver la simplicité d'utilisation du dispositif. Le dispositif ne doit pas être démonté et ne comporte pas de parties démontables. Le poids global du dispositif ne dépasse pas 10kg. Le dispositif ne contient pas de substances cancérigènes,

ES

INFORMACIÓN GENERAL

El dispositivo no presenta dificultades interpretativas para su uso incluso para personas con discapacidad visual, lectora o cognitiva. No presenta problemas de facilidad de uso. El dispositivo no debe desmontarse y no tiene piezas desmontables. El dispositivo no tiene una masa total superior a 10 kg. El dispositivo no contiene sustancias cancerígenas, mutágenas o tóxicas. Es resistente a la corrosión y a las variaciones de temperatura.

korrosionsbeständig und
hält
Temperaturschwankungen
stand.

mutagènes ou toxiques.
Il résiste à la corrosion et
aux variations de
température.







IT




EN

DE

FR

ES

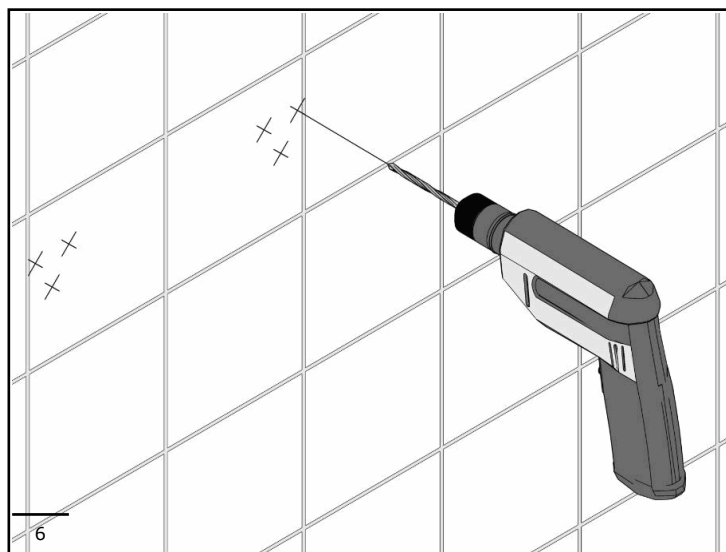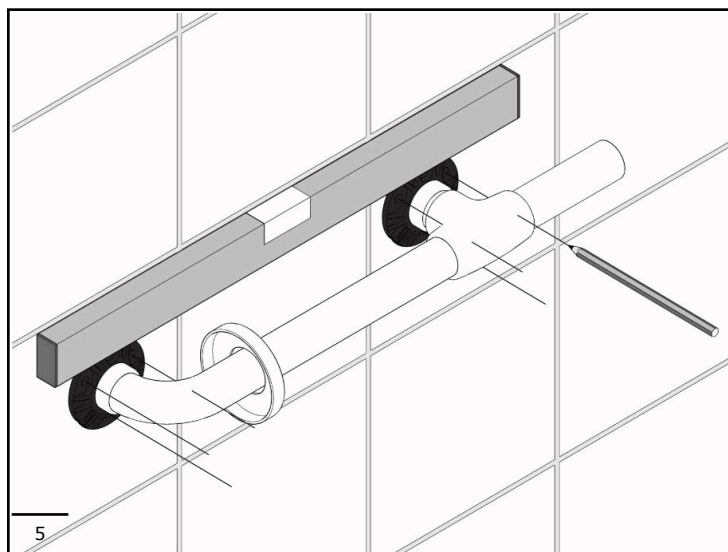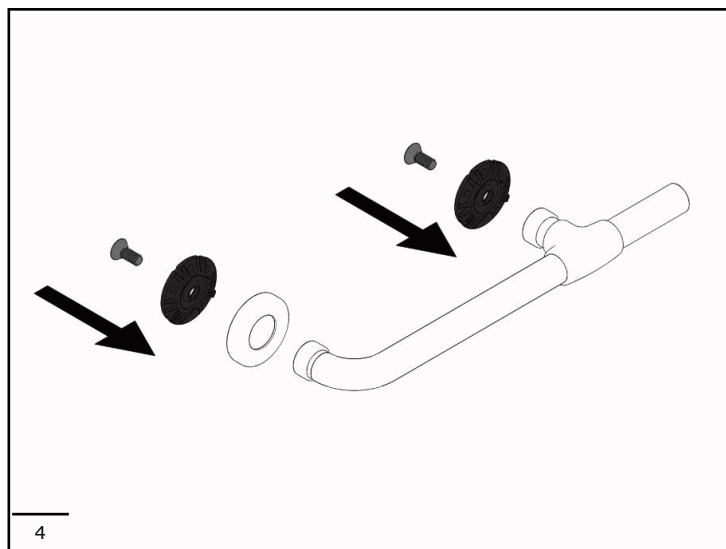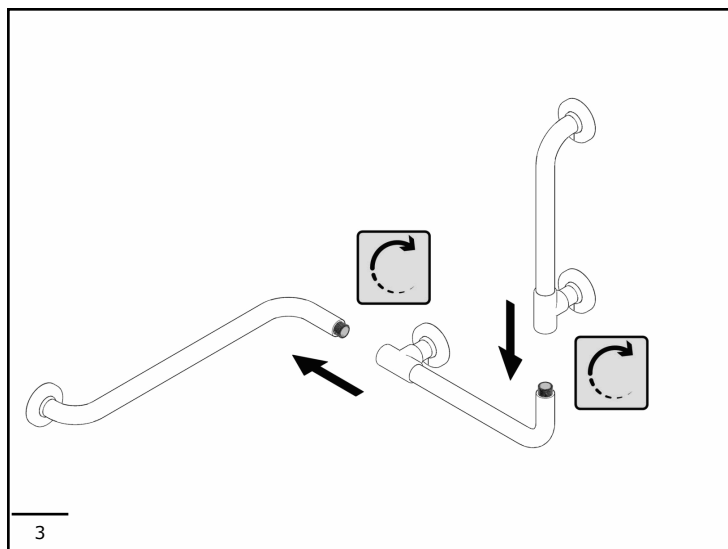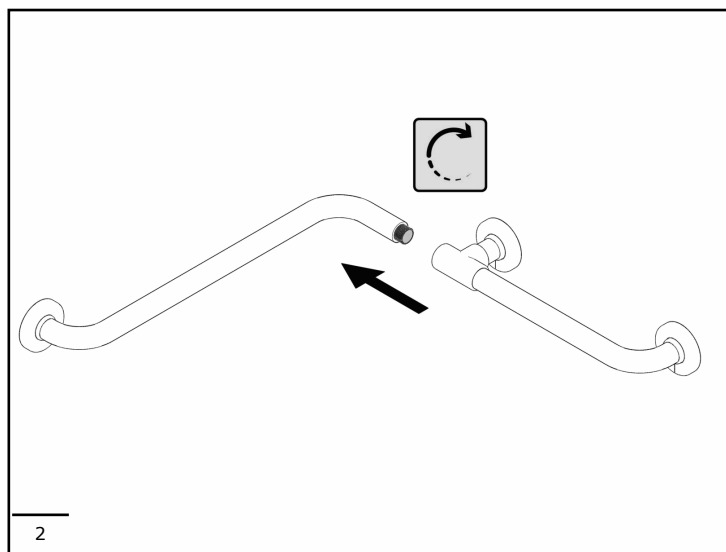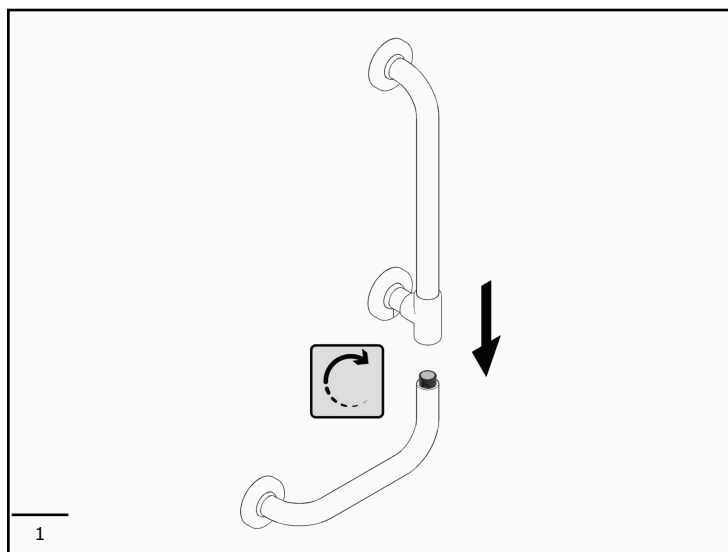

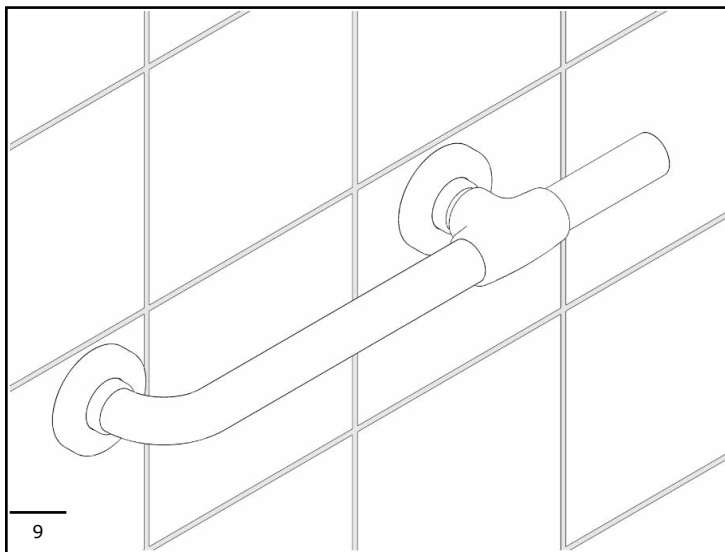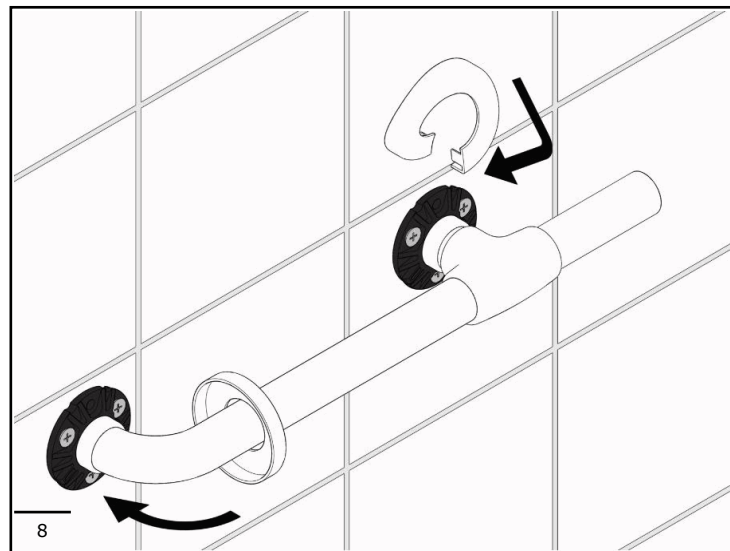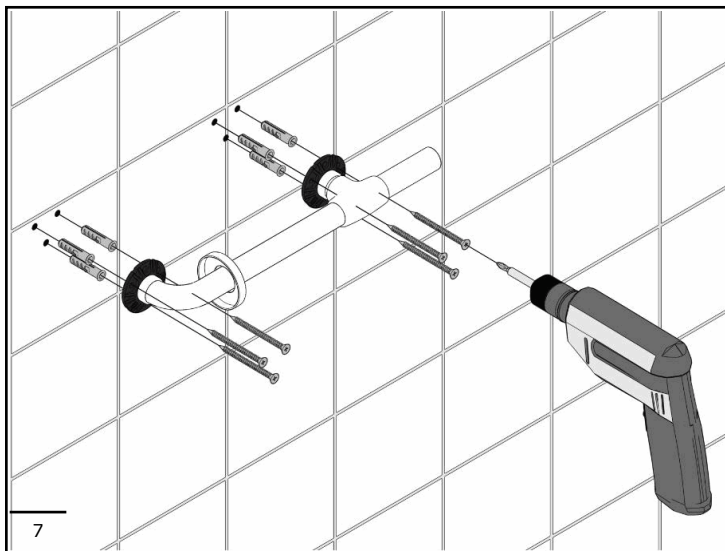

IT

ISTRUZIONI PER L'USO

Il dispositivo è un sostegno da utilizzare esclusivamente come appoggio o sostegno con la semplice presa manuale. L'uso improprio, ad esempio per esercizi ginnici, può provocare infortuni con gravi conseguenze. Non sottoporre il dispositivo a carico superiore a quello per cui è stato progettato. Il superamento di questo valore può provocare danni permanenti sia al dispositivo sia alle persone. Per il corretto utilizzo il dispositivo deve essere lasciato libero da qualsiasi oggetto e facilmente raggiungibile.

EN

INSTRUCTIONS FOR USE

The device is a grab bar to be used exclusively for supporting the user or resting on by gripping it with the hand. Using the device improperly, for example for gymnastics exercises, can cause injuries with serious consequences. Do not subject the device to loads exceeding for which it was designed. Exceeding this load can cause permanent damage to the device or harm to people. To ensure correct use of the device, the latter must be left free of any objects and be easily reachable.

DE

GEBRAUCHSANWEISUNG

Das Gerät ist ein Griff, der nur als Stütze oder Haltegriff für die Hand gedacht ist. Ein unsachgemäßer Gebrauch insbesondere für Gymnastikübungen kann Unfälle mit schwerwiegenden Folgen hervorrufen. Das Gerät keinen höheren Last aussetzen als angegeben. Höhere Lasten können sowohl am Gerät als auch an Personen zu dauerhaften Beschädigungen führen. Für einen korrekten Gebrauch muss das Gerät frei von Gegenständen und leicht zugänglich bleiben.

FR

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Le dispositif est une poignée à utiliser exclusivement comme support ou soutien, à l'aide d'une simple prise manuelle. Une utilisation incorrecte, par exemple pour des exercices de gymnastique, peut entraîner des accidents ayant de graves conséquences. Ne pas soumettre le dispositif à une charge supérieure à celle indiquée. Le dépassement de cette valeur peut entraîner des dommages permanents aussi bien sur le dispositif que pour les utilisateurs. Pour une utilisation correcte, le dispositif ne

ES

INSTRUCCIONES DE USO

El aparato es un soporte que debe utilizarse únicamente como apoyo o soporte con un simple asidero. Un uso inadecuado, por ejemplo para ejercicios gimnásticos, puede provocar lesiones con graves consecuencias. No someta el aparato a una carga superior a aquella para la que ha sido diseñado. Superar este valor puede causar daños permanentes tanto al aparato como a las personas. Para un uso correcto, el aparato debe estar libre de todo objeto y ser fácilmente accesible.

IT**AVVERTENZE SULLA SICUREZZA**

Il montaggio del dispositivo deve essere effettuato da personale competente e qualificato, (muratore o idraulico professionista) che dovrà verificare che gli elementi di fissaggio, qualora forniti, siano idonei per la parete di installazione. Per garantire la stabilità e sicurezza il dispositivo deve essere fissato con tasselli e viti adeguati al tipo di muro. Se il dispositivo dovesse risultare instabile sospendere l'uso fino a quando questo non sia stato controllato da un tecnico incaricato. Il produttore non è responsabile per un montaggio del dispositivo non conforme a quanto riportato nel presente manuale di uso e manutenzione.

EN**SAFETY PRECAUTIONS**

The device must be installed by trained and qualified personnel (bricklayer or professional plumber) who must verify whether the fixing elements, if provided, are suitable for the relevant wall. To guarantee stability and safety, the device must be attached with wall plugs and screws suitable for the relevant type of wall. Do not subject the device to loads exceeding those specified. If the device should become unstable, suspend its use until it is properly checked by the relevant technician. The manufacturer declines all responsibility for installation of the device not conforming in this manual for use and maintenance.

DE**SICHERHEITSHINWEISE**

Das Gerät muss von geschultem und qualifiziertem Personal (Maurer oder Fachinstallateur) installiert werden, das prüfen muss, ob die Befestigungselemente, falls vorhanden, für die jeweilige Wand geeignet sind. Um Stabilität und Sicherheit zu gewährleisten, muss das Gerät mit Dübeln und Schrauben befestigt werden, die für die jeweilige Wandart geeignet sind. Belasten Sie das Gerät nicht über das angegebene Maß hinaus. Sollte das Gerät instabil werden, setzen Sie es bis zur fachgerechten Überprüfung durch den zuständigen Techniker außer Betrieb. Der Hersteller lehnt jede Verantwortung für eine Installation des Geräts ab, die nicht mit dieser Betriebs- und Wartungsanleitung übereinstimmt.

doit pas être entravé par un objet quelconque et être facilement accessible.

FR**AVERTISSEMENTS CONCERNANT LA SÉCURITÉ**

Le montage du dispositif doit être effectué par du personnel compétent et qualifié, (maçon ou plombier professionnel) qui devra vérifier que les éléments de fixation, à condition que si, sont adaptés au mur d'installation. Une fois l'installation effectuée, réaliser un ou plusieurs tests d'utilisation. Pour garantir la stabilité et la sécurité, le dispositif doit être fixé avec des tasseaux et des vis adaptées au type de mur. Ne pas soumettre le dispositif à une charge supérieure à celle indiquée. En cas d'instabilité du dispositif, interrompre l'utilisation jusqu'à l'exécution d'une vérification par un technicien spécialisé. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable en cas de montage du dispositif non conforme aux indications mentionnées dans ce manuel d'utilisation et d'entretien.

ES**ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD**

La instalación del aparato debe ser realizada por personal competente y cualificado (albañil o fontanero profesional), que debe comprobar que los elementos de fijación, si se suministran, son adecuados para la pared de instalación. Para garantizar la estabilidad y la seguridad, el aparato debe fijarse con tacos y tornillos adecuados al tipo de pared. Si el aparato resultara inestable, suspenda su uso hasta que haya sido revisado por un técnico autorizado. El fabricante no se hace responsable de ninguna instalación del aparato que no se ajuste a las presentes instrucciones de uso y mantenimiento.

IT**PULIZIA**

Pulire la superficie del dispositivo con un panno umido bagnato con sapone neutro liquido (ad esempio detergente per stoviglie). E 'vietato l'uso di detergenti abrasivi liquidi contenenti cloro, acidi o basi forti, solventi concentrati come acetone e trielina o derivati, che possono causare opacizzazione del materiale. E 'vietato utilizzare fonti d'aria calda per

EN**CLEANING**

Clean the surface of the device using a damp cloth wetted with liquid neutral soap (e.g. dish soap). It is forbidden to use abrasive liquid detergents containing chlorine, strong acids or bases, concentrated solvents such as acetone and trichloroethylene or derivatives, which may cause the material too dull. It is forbidden to use hot air sources for drying.

DE**REINIGUNGS-UND PFLEGEHINWEISE**

Reinigen Sie die Oberfläche des Geräts mit einem feuchten Tuch, das mit flüssiger Neutralseife (z. B. Spülmittel) angefeuchtet ist. Es ist verboten, scheuernde, chlorhaltige Flüssigreiniger, starke Säuren oder Basen, konzentrierte Lösungsmittel wie Aceton und Trichlorethylen oder Derivate zu verwenden, die das Material zu stumpf machen können.

FR**NETTOYAGE**

Passer un chiffon humide, imbibé de savon neutre liquide de type liquide vaisselle, sur la surface du dispositif. Il est interdit d'utiliser des détergents liquides abrasifs, contenant du chlore, des acides ou des bases fortes, des solvants concentrés, tels que de l'acétone et du trichloréthylène et dérivés, pouvant noircir le matériau. Il est interdit d'utiliser des

ES**LIMPIEZA**

Pasar por la superficie del dispositivo un paño húmedo embebido en jabón líquido neutro, como un detergente para vajillas. Prohibido utilizar detergentes líquidos abrasivos, con cloro, ácidos o bases fuertes, solventes concentrados, como acetona y tricloroetileno o derivados que puedan quitar brillo al material. Prohibido utilizar fuentes de aire caliente para el

l'asciugatura.
Disinfettare la superficie
del dispositivo utilizzando
un prodotto tipo
candeggina almeno una
volta alla settimana.

Disinfect the device's
surface using a
bleach-type product at
least once a week.

Es ist verboten,
Heißluftquellen zum
Trocknen zu verwenden.
Desinfizieren Sie die
Oberfläche des Geräts
mindestens einmal pro
Woche mit einem
bleichmittelähnlichen
Produkt.

sources d'air chaud pour
sécher le dispositif.
Désinfecter la surface de
l'appareil avec des
produits neutres au
moins une fois par
semaine.

secado.
Desinfectar la superficie
del dispositivo con
productos neutros al
menos una vez a la
semana.

IT

EN

DE

FR

ES

MANUTENZIONE

MAINTENANCE

WARTUNG

ENTRETIEN

MANTENIMIENTO

Controllare almeno ogni
3 mesi la stabilità dei
fissaggi.
Se il dispositivo dovesse
risultare instabile
contattare un installatore
di fiducia.
Il dispositivo non ha
regolazioni.
Per eventuali danni si
prevede la completa
sostituzione.

Check the stability of the
fixing at least every 3
months.
Should the device
become unstable, contact
the installer.
The device has no
adjustments.
It shall be fully replaced in
case of any damages

Prüfen Sie alle 3 Monate
die Stabilität der
Wandbefestigung.
Das Gerät, wenn es
instabil erscheint, von
einem qualifizierten
Techniker kontrollieren
lassen
Das Gerät besitzt keine
Einstellungen.
Bei eventuellen Schäden
muss das ganze Produkt
ausgetauscht werden

Contrôler au moins tous
les 3 mois la stabilité des
fixations murales.
En cas d'instabilité du
dispositif, contacter un
installateur certifié.
Le dispositif ne dispose
pas de réglages.
En cas de dommages
éventuels, il est
nécessaire de remplacer
totalement le dispositif

Controlar al menos cada
3 meses la estabilidad
de las fijaciones.
Si el dispositivo resulta
inestable, contactar con
un instalador de
confianza.
El dispositivo no tiene
regulaciones.
En caso de daños, será
necesaria la sustitución
completa.

IT

EN

DE

FR

ES

CONDIZIONI DI UTILIZZO

CONDITIONS OF USE

GEBRAUCHSBEDINGUN GEN

CONDITIONS D'UTILISATION

CONDICIONES DE USO

Il dispositivo non risente
della temperatura
dell'ambiente e
comunque NON deve
essere installato in
ambienti soggetti a
temperature minore di 4
°C o maggiore di 40 °C .
Non installare in saune.
Non rispettare le
temperature indicate
potrebbe danneggiare il
rivestimento in plastica
del dispositivo.

The device is not affected
by the room's
temperature, though it
must NOT be installed in
environments subject to
temperatures below 4°C
or above 40°C.
Do not install in saunas.
Not comply with the
indicated temperatures
may damage the plastic
coating of the device.

Das Gerät ist
unempfindlich gegenüber
der Raumtemperatur, darf
jedoch NICHT in Räumen
verwendet werden, in
denen Temperaturen
unter 4 °C und über 40 °C
herrschen.
Nicht für Saunen
geeignet.

Le dispositif n'est pas
sensible à la température
de l'environnement ;
toutefois, celui-ci NE doit
PAS être installé dans
des environnements
sujets à des
températures inférieures
à 4° C ou supérieures à
40° C.
Ne pas installer dans un
sauna.

El aparato no se ve
afectado por la
temperatura ambiente y
NO debe instalarse en
ambientes sometidos a
temperaturas inferiores
a 4 °C o superiores a 40
°C .
No lo instale en saunas.
El incumplimiento de las
temperaturas indicadas
puede dañar la carcasa
de plástico del
dispositivo.

IT

EN

DE

FR

ES

SMALTIMENTO

DISPOSAL

ENTSORGUNG

ÉLIMINATION

ELIMINACIÓN

Lo smaltimento è a cura
dell'utilizzatore che deve
effettuarlo secondo le
leggi del paese nel quale
il dispositivo è installato.
Il dispositivo non è
fabbricato con sostanze
dannose o pericolose per
la salute e per l'ambiente
e tutte le parti che lo
compongono sono
riciclabili e/o riutilizzabili.
Per la salvaguardia
dell'ambiente per la sua
fabbricazione sono stati
utilizzati anche materiali

The user is responsible
for the device's disposal,
which must occur in
accordance with the laws
of the country in which the
device is installed. The
device is not
manufactured using
substances that are
hazardous to human
health and the
environment, and all parts
comprising it are
recyclable and/or
reusable. In order to
safeguard the

Die Entsorgung ist
gemäß den Vorschriften
des Landes
durchzuführen.
Der Benutzer hat Sorge zu
tragen dass das
verwendete Produkt nach
Beendigung der Nutzung
selbst zu entsorgen.
Unsere Produkte
enthalten keine
schädlichen oder
gefährlichen Substanzen
für die Gesundheit und
die Umwelt und sind in
allen Teilen recycelbar

L'élimination du dispositif
est à la charge de
l'utilisateur qui doit
l'effectuer selon les lois
du pays d'installation du
dispositif. Les dispositifs
ne sont pas fabriqués
avec des substances
nocives ou dangereuses
pour la santé et pour
l'environnement, et toutes
les parties qui le
composent sont
recyclables et/ou
réutilisables. Pour la
protection de

Desechar el dispositivo
de conformidad con las
leyes del país de
instalación. Los
dispositivos no están
hechos de sustancias
nocivas o peligrosas
para la salud y el medio
ambiente, y todas las
partes que lo componen
son reciclables y/o
reutilizables. Para la
fabricación se han
utilizado materiales con
cierto porcentaje de
reciclado, en defensa

con percentuali di riciclato.
Tenere l'imballo lontano dalla portata dei bambini; rischio di soffocamento.

environment, the device also contains a certain amount of recycled materials.
Keep away from children packaging; risk of suffocation.

und/oder wiederverwertbar. Zum Schutz der Umwelt wurden bei der Herstellung auch Materialien mit einem Anteil an Recyclingmaterial verwendet.

l'environnement, le dispositif est fabriqué à base de matériaux partiellement ou totalement recyclables.
Tenir l'emballage à l'écart des enfants ; risque de étouffement.

del medio ambiente.
Mantener alejado de los niños de embalaje; riesgo de asfixia.

IT

EN

DE

FR

ES

ULTERIORI INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni visitare il sito internet o contattare il nostro rivenditore di zona.

FURTHER INFORMATION

For further information, please visit our website or contact the our dealer zone

WEITERE AUSKÜNFTE

Für weitere Auskünfte, besuchen sie unsere Website oder setzen sie sich mit ihrem lokalen Händler Verkäufer in Verbindung

INFORMATION COMPLEMENTAIRE

Pour toute information complémentaire, veuillez visiter le site ou bien contacter notre concessionnaire de zone

PARA MÁS INFORMACIÓN

para más informacion visite nuestro sitio o contacte nuestro distribuidor local

IT

EN

DE

FR

ES

NOTE

Ponte Giulio si riserva il diritto di apportare modifiche ai prodotti o alle loro specifiche senza l'approvazione preventiva o la comunicazione al cliente per:
- Modifiche necessarie per motivi di sicurezza,
- Cambiamenti che non influenzano negativamente le prestazioni del prodotto,
- Modifiche necessarie per soddisfare le specifiche del prodotto,
- Modifiche necessarie per soddisfare i requisiti di legge e dei regolamenti applicabili

NOTE

Ponte Giulio reserves the right to make changes to the products or to their specifications without prior approval or notification to the customer for:
- Changes required for safety purposes,
- Changes that do not adversely affect the product performance,
- Changes needed to meet the product specifications,
- Changes needed to comply with legal requirements or applicable regulations

NOTE

Ponte Giulio behält sich das Recht vor, Änderungen an den Produkten oder ihren Spezifikationen ohne vorherige Genehmigung oder Benachrichtigung an den Kunden vorzunehmen:
- Änderungen, die für Sicherheitszwecke erforderlich sind,
- Änderungen, die die Produktleistung nicht beeinträchtigen,
- Änderungen, die erforderlich sind, um die Produktspezifikationen zu erfüllen,
- Änderungen, die erforderlich sind, um gesetzlichen Vorschriften oder anwendbaren Vorschriften einzuhalten

NOTE

Ponte Giulio se réserve le droit d'apporter des modifications aux produits ou à leurs spécifications sans l'approbation préalable ou la notification au client pour:
- Les changements nécessaires à des fins de sécurité,
- Les modifications qui ne nuisent pas à la performance du produit,
- Les changements nécessaires pour répondre aux spécifications du produit,
- Les changements nécessaires pour se conformer aux exigences légales ou réglementaires applicables

NOTAS

"Ponte Giulio" se reserva el derecho a realizar cambios en los productos o en sus especificaciones sin previa aprobación o notificación al cliente por:
- Cambios necesarios por razones de seguridad,
- Cambios que no afecten negativamente a las prestaciones del producto,
- Cambios necesarios para cumplir las especificaciones del producto,
- Cambios necesarios para cumplir los requisitos de las leyes y reglamentos aplicables".

Ponte Giulio S.p.a
Località Ponte Giulio
05018 Orvieto (TR) ITALY
<http://www.pontegiulio.it> - info@pontegiulio.it
Tel.: +39 0763 316044 - Fax.: +39 0763 316043